



SERENE (0103012)



180 kg



El sistema SERENE es la superficie más avanzada de alivio de presión gracias a su terapia de baja presión continua y presión alternante.

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

Funda Silver+ Stretch con tratamiento ión plata para minimizar la contaminación microbiana.

TERAPIAS AVANZADAS

Modo Dual: Baja Presión Continua y Presión Alternante para una prevención aún más eficaz.


Modo Seat Inflation con efecto anticizalla.

Modo Pulsation para incrementar la oxigenación de los tejidos.



DIMENSIONES Y PESOS

• Dimensión colchón:	2000 X 900 X 203 mm
• Dimensión compresor:	312 X 260 X 160 mm
• Peso colchón:	7,5 kg
• Peso compresor:	5 kg
• Dimensiones de la caja:	570 X 430 X 580 mm
• Peso total de la caja:	14 kg
• Unidades por caja exterior:	2
• Dimensión total de la caja exterior:	895 X 590 X 618 mm
• Peso total de la caja exterior:	29,3 kg

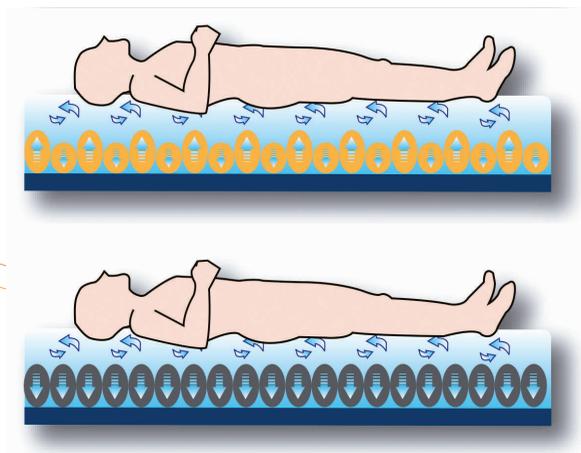

Baja Presión Continua y Presión Alternante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Compresor:	
Voltaje:	230V, 50 Hz
Ciclo temporal:	5, 10, 15 y 20 min.
Funciones:	Botón encendido y apagado. Bloqueo de panel. Alternante o estático. Max Firm. Función Pulsation. Sistema inflado del asiento.CPR.
Alarma audible y visual que indica:	Avería, baja presión y fallo eléctrico.
• Sobrecolchón (Materiales):	
Funda:	Silver+ Stretch con tratamiento ión plata
Celdas:	Nylon / TPU
Base:	Nylon / TPU
• Peso máximo soportado:	180 kg

GARANTÍA

- SERENE: 2 años*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

CERTIFICADOS

