



Superficies Especiales de Manejo de Presión -  
Baja Presión Continua

**APEX**

Para una mayor calidad de vida

# ACS ZONE BARIATRIC

(0103007B)



450 kg



COLCHÓN  
de REEMPLAZO



## MAYOR CONFORT

3 zonas diferentes de presión en el colchón (cabeza, cuerpo y piernas).

Sistema inflado del asiento: incrementa automáticamente la presión de las celdas centrales cuando se incorpora al usuario.

Ajuste de presión en 10 niveles.

Cubierta elástica sin costuras, fabricada en poliuretano.

## MAYOR SEGURIDAD

Refuerzos laterales para prevenir caídas.

Válvula CPR que desinfla el colchón en 10-15 segundos.

Alarma audible y visual en caso de baja presión, fallo eléctrico y CPR.

Filtro de aire antibacterias.

Posibilidad de incorporar un foam de 5 cm.

El sistema ACS ZONE BARIATRIC ofrece el tratamiento para úlceras por presión hasta grado IV para pacientes con hasta 450 kilos de peso.




## DIMENSIONES Y PESOS

• Dimensión colchón:	2000 X 1220 X 254 mm
• Dimensión compresor:	380 x 158 x 268 mm
• Peso colchón:	9,5 kg
• Peso compresor:	5,5 kg
• Unidades por caja exterior:	1
• Dimensión total de la caja exterior:	740 X 450 X 510 mm
• Peso total de la caja exterior:	21,5 kg




Válvula CPR

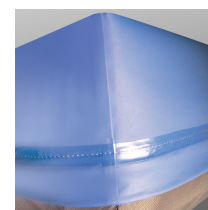

Costura reforzada



Normal Operation

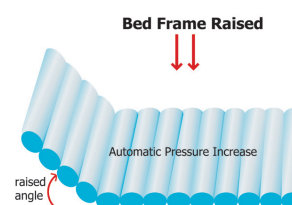

Bed Frame Raised

Automatic Pressure Increase

raised angle

Sistema inflado del asiento

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Compresor:	
Voltaje:	AC220 - 240V, 50/60 Hz - 3,0A
Máxima salida de aire (lpm):	1.300 litros / min
Rango de presión:	10 niveles
Funciones:	Botón de encendido y apagado. Bloqueo de panel. Max Firm. Sistema inflado del asiento. CPR
Alarma audible y visible que indica:	Baja presión, fallo eléctrico y CPR. Botón para silenciar la alarma
• Colchón de reemplazo (Materiales):	
Funda:	Elástica / Poliéster / PU
Celdas:	Nylon / PU (20 celdas de 20,32 cm y 2 protectores laterales de 25,4 cm)
Base:	Nylon / PU
3 zonas:	Cabeza, cuerpo y piernas
• Nivel sonoro:	56 dBA
• Peso máximo soportado:	450 kg

## GARANTÍA

- ACS ZONE BARIATRIC: 2 años\*

\*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

## CERTIFICADOS

