



crocodile™

Crocodile es un andador para niños con discapacidad, que necesitan una asistencia suplementaria en su caminar diario



Crocodile es puro diseño, en el sentido literal de la palabra. Situado detrás del niño, el andador le permite libertad de movimientos y facilita andar en posición erguida/vertical. Las empuñaduras ajustables se pueden adaptar individualmente a la posición que más convenga al niño para que estén lo más cerca de su cuerpo y le proporcionen el máximo soporte y estabilidad.

Crocodile es ligero, fácil de plegar, extremadamente seguro y fácil de usar. Muchos niños que necesitan algo de soporte extra podrían utilizar Crocodile como un andador posterior básico, pero también como un andador posterior de pleno soporte combinando sus accesorios posturales.

Crocodile está disponible en tres tallas y está ideado para niños entre los 2 a 18 años. No todos los niños son iguales y, por eso, es tan importante utilizar la tabla de medidas para encontrar la talla correcta.



27-69 cm



39-100 cm



max.180 cm



max.80 kg



Altura regulable

Altura fácilmente ajustable sin utilizar herramientas



Empuñaduras multiajustables

Permiten aumentar la altura y la anchura. Colocar las empuñaduras cerca del cuerpo proporciona mayor soporte y una mejor postura para andar



Antirretroceso en ruedas posteriores

Evita que el andador se deslice hacia atrás. Resulta muy fácil de bloquear/desbloquear una vez mejoren las habilidades del niño. El bloqueo de la marcha atrás en las ruedas posteriores se utiliza en niños con menor equilibrio y control



Chasis plegable

Permite un sencillo transporte y almacenaje de Crocodile



Estándar

La versión estándar de Crocodile se entrega con empuñaduras, ruedas con antirretroceso, barra superior acolchada y freno por fricción en las ruedas traseras




Color del chasis

Disponible en diferentes colores



Amarillo
para talla 1

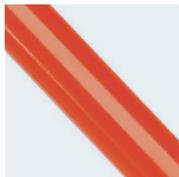

Naranja
para talla 2



Negro metalizado
para talla 3



Gris metalizado para
talla 3

Ruedas



Ruedas delanteras
con direccionador



Freno por fricción en
ruedas traseras

Tope de seguridad


Los originales tope de seguridad antirretroceso son muy fáciles de bloquear y desbloquear



Bloqueado



Desbloqueado

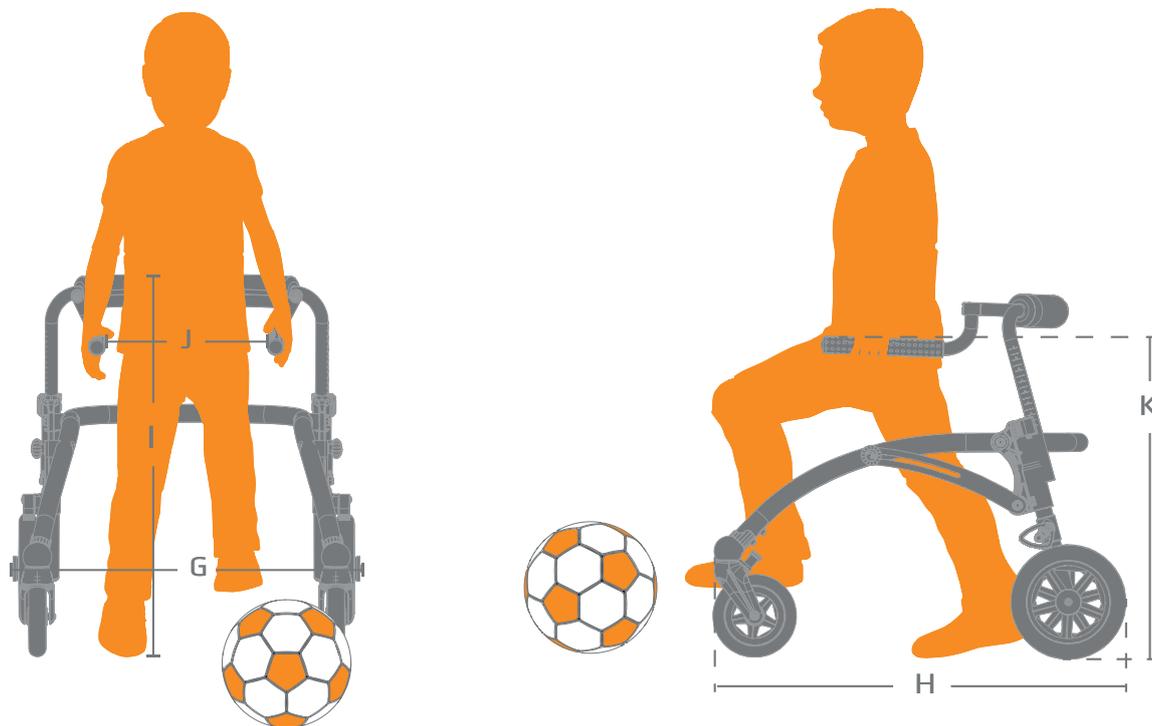


Medidas

	Talla 1 cm	Talla 2 cm	Talla 3 cm
Anchura entre empuñaduras (J)	27-55	32-60	35 - 69
Altura desde el suelo hasta las empuñaduras (K)	39-70	55-88	70 - 100
Anchura máxima (G)	62	69	69
Longitud (H)	72	84	87
Altura desde el suelo hasta la barra superior (I)	49-66	65-82	77
Longitud, plegado	72	86	100
Altura, plegado	31	27	29
Peso, estándar	5,5 kg (12 lb)	6,5 kg (14 lb)	12 kg (26 1/2 lb)
Altura máxima del usuario	115	150	180
Peso máximo del usuario	30 kg (66 lb)	45 kg (99 lb)	80 kg (176 1/4 lb)
Radio de giro	75	77	90



ACCESORIOS

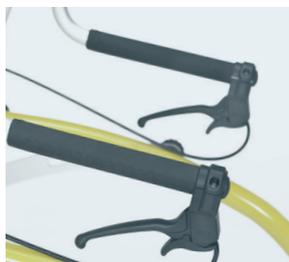**Frenos de mano**

86834

Eficaz freno para parar o aparcar

86834 Para talla 1-2

86873 Para talla 3

**Soporte para antebrazo con empuñadura**

8681x

Posiciona los brazos del niño. Se pueden utilizar en Pony/Bronco

Talla medidas

1 cojín L:15 x W:8 cm

2 cojín L:18 x W:10 cm

3 cojín L:18 x W:10 cm

**Barra transversal**

86880

Para instalación de accesorios.

Solo para talla 3

Talla única

**Soportes pélvicos (soporte posterior), modelo Gator**

8680x

Proporciona soporte lateral a la cadera

Talla medidas

Pequeña H:9 x W:17 cm

Grande H:10 x W:24 cm

**Soporte posterior**

86816

Ayuda a estabilizar la pelvis

Talla medidas

Única H:11 x W:18 cm


**Cincha para soportes pélvicos**

SN4016

Para mayor seguridad al andar

Talla medidas

Única L:38-47 cm

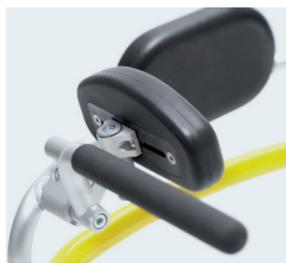**Soportes pélvicos**

86819

Proporciona soporte a la cadera lateralmente

Talla medidas

Única H:8 x W:19 cm

**Soporte posterior, ajustable**

86886

Solo para talla 3. Instalado en la barra transversal

Única W:24-29 x H:18 cm

**Asiento**

8682x. Permite descansar al niño. Se puede plegar mientras el niño anda

Talla medidas

1-2 W:30 x D:12 cm

Altura desde el suelo: 29/42 cm

3 W:36 x D:16 cm

Altura desde el suelo: 56 cm

**Calzón**

8682x

Permite el soporte parcial del peso

Talla medidas

1 cintura: 60 cm

2 cintura: 70 cm

**Tope para asa**

86861

Talla única

**Bolsa**

86839

Para el transporte de juguetes

Talla única

SUPACE Orto-Distribución S.L. Distribuidor exclusivo para España



Bolsa

86843

Para el transporte de juguetes
Para talla 3

Talla única



Antivuelco

86815

Seguridad extra, evita que
Crocodile vuelque

86815 Para talla 1-2
86815-35 Para talla 3



Antivuelco

86815-F

Seguridad extra, evita que
Crocodile vuelque

86815-F Para talla 1-2
86815-3F Para talla 3

