


Relievo Top Care

Superficie Especial de Manejo de Presión

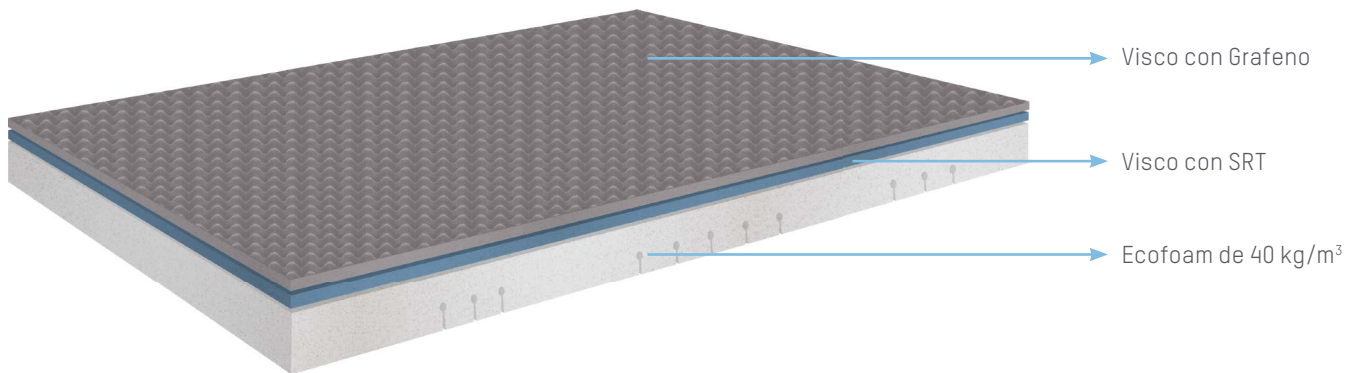

Relievo Top Care


Superficie Especial de Manejo de Presión

El colchón Relievo Top Care es la SEMP Apex estática de alta especificación indicada para pacientes de riesgo bajo de aparición de úlceras por presión.

Relievo Top-Care es una superficie de alta especificación, compuesta por 3 capas de espuma inteligente con propiedades únicas:

- Una capa superior terapéutica compuesta por Grafeno que ayuda a regular el calor corporal.
- Capa intermedia Visco con SRT, también terapéutica, que permite una inmersión óptima del paciente, aumentando la superficie, redistribuyendo la presión y evitando el efecto muelle.
- Una base de espuma de poliuretano de alta densidad para dar firmeza a la SEMP.

MAPA de presión

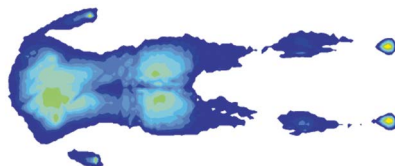

Medición de presiones

Presión máxima Hombros	37.0mmHg
Presión máxima Pelvis	36.9mmHg
Presión máxima Piernas	19.4mmHg
Presión máxima Tobillos	43.6mmHg
Área de contacto Total	4066cm ²

Su funda bielástica fabricada con tejido de poliuretano, se adapta al cuerpo del paciente. Es transpirable e impermeable a líquidos. Incluye cremallera en U protegida con una solapa para evitar la entrada de líquidos.




Capa superior visco con Grafeno:

El Grafeno de célula abierta, optimiza el microclima gracias a sus propiedades termorreguladores ayudando a minimizar el riesgo de aparición de UPPs.



Distribuye el calor corporal por toda la superficie del colchón para garantizar el máximo frescor. Su mayor conductividad (10.000 veces mayor que una espuma estándar) disipa el calor corporal a lo largo de toda la superficie.

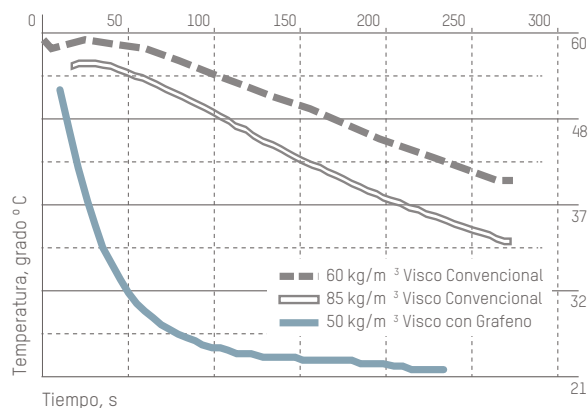

Su estructura única de célula abierta mejora el flujo de aire un 95% favoreciendo la transpiración de sus poros y controlando los olores.

Capa intermedia visco con SRT (Smart Response Technology):


El SRT (Smart Response Technology) logra una redistribución inteligente de la presión reduciendo el riesgo en UPPs.



SRT (Smart Response Technology): Visco inteligente que permite una inmersión óptima del paciente, evitando el contacto con la base (efecto muelle). Gracias a la composición del SRT, los cambios de temperatura no afectan a sus propiedades, evitando que se endurezca en ambientes fríos o se hunda con altas temperaturas.




Visco Convencional

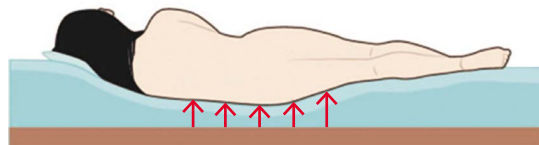

Relieve Top Care con efecto muelle

Base Ecofoam de alta densidad:

La base Ecofoam, se ha diseñado con cortes transversales para una mayor adaptación en camas articuladas. La alta calidad de la espuma garantiza firmeza y confort al usuario.

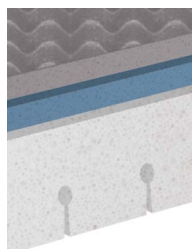

Descripción de Producto	Referencia
Relieve Top Care 90 cm	01130008
Relieve Top Care 105 cm * bajo pedido*	01130008-105

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	40 x 40 x 92 cm
Peso total de la caja	16 kg

Especificaciones técnicas	
Medidas del colchón 90cm	190 x 90 x 17,5 cm
Medidas del colchón 105cm	190 x 105 x 17,5 cm
Base del colchón	12 cm de Poliuretano 40 kg/m ³ – 3,5 kPa Con cortes para un mejor ajuste en camas articuladas
Capa media	2,5 cm de visco con SRT. 60 kg/m ³ – 1,6 kPa
Capa superior	3 cm de visco con Grafeno. 60 kg/m ³ – 1,9 kPa
Peso máximo soportado	140 kg
Certificaciones	OEKO-TEX STANDARD 100
Garantía	4 años

Especificaciones de la funda	
Material	PU impermeable bielástica
Cierre	Cremallera con solapa
Resistente al agua	Sí
Permeable al vapor	Sí
Antialérgica	Sí
Protocolo de limpieza	
Certificaciones	OEKO-TEX STANDARD 100
Garantía	2 años



APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 Fax: 94.470.64.09
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com

