



I-Elite

Movilidad Eléctrica

Plegado automático:



I-Elite

Movilidad Eléctrica

La I-Elite es la Scooter que se pliega y despliega automáticamente presionando el pedal rojo. Destaca por incluir reposabrazos, luces led delanteras y traseras, asiento giratorio y ruedas neumáticas grandes.

Gracias a sus reducidas dimensiones 96,5 x 53 x 87 - 102 cm, podrás llevarla a donde quieras.

- **Cómoda:** Los reposabrazos son regulables en altura y anchura y pueden abatirse facilitando el acceso al usuario. Cuenta con ruedas neumáticas que aportan un mayor confort de marcha y permiten subir con mayor facilidad los bordillos.
- **Compacta:** Solo mide 96,5 cm desplegada y 56,5 cm plegada. Gira en tan solo 82 cm.
- **Segura:** Cuenta con sistema de encendido "Contactless" que permite encender la Scooter con tan solo acercar la llave y sistema ESP (Control Electrónico de Estabilidad). Además tiene una llave de seguridad para la batería. Con ruedas antivuelco (laterales y traseras) que garantizan la seguridad del usuario. Incorpora luz frontal y trasera LED que permite ver y ser visto.
- **Fácil de transportar:** Con asiento extraíble para facilitar su transporte. Además gracias a su giro de 360°, el usuario puede sentarse fácilmente en la scooter. Sus 4 ruedas permiten moverla como un trolley una vez plegada.
- **Ligera:** Gracias a su batería de litio, su peso total es de 27,3 kg.

Elementos destacados:



Asiento giratorio de 360°. Apoyabrazos abatibles y regulables en altura y anchura



Sistema ESP y ruedas antivuelco. Cesta portaobjetos incluida.




Desmontable en 2 piezas



Llave contactless



Manillar ergonómico y regulable en altura

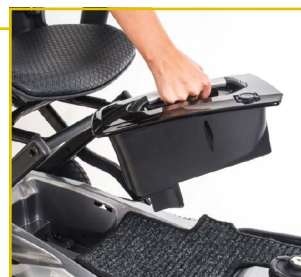

Batería de litio extraíble para facilitar su carga



Accionar el pedal para iniciar el plegado/ desplegado automático



Suspensión delantera. Luces LED delanteras y traseras

Accesorios:



Bolsa transporte



Bolsa trasera



Medidas en cm

Descripción de producto	Referencia
I-Elite	0401037E
Descripción de accesorios	
Bolsa de transporte	04060639
Bolsa trasera	04060356
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	55 x 48,5 x 90 cm
Peso total de la caja	30,9 kg
Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	96,5 x 53 x 87 - 102 cm
Dimensiones con apoyabrazos	96,5 x 56,5 x 87 - 102 cm
Peso máximo soportado	115 kg
Peso con baterías	27,3 kg
Peso sin baterías	24 kg
Velocidad máxima	6 km/h
Pendiente máxima	<100 kg hasta 5° >100 kg hasta 3°
Radio de giro	82 cm
Tipo de motor	270 W, Motor 4 polos
Ruedas delanteras	20 x 5 cm. Neumáticas
Ruedas traseras	23 x 6,5 cm. Neumáticas
Baterías	De litio 24V 11,5 Ah x 1 unidad
Cargador	2 Amp, externo, 110/240 Volt.
Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año

APEX MEDICAL, S.L.

c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)

Tel: 94.470.64.08

Fax: 94.470.64.09

info@apexmedical.es

www.apexmedicalcorp.com

