


Pro-CARE 2

El sobre colchón ideal para pacientes de riesgo bajo-medio (según Escala Braden) y úlceras de grado II. Dispone de alarmas acústicas y visuales con función de silenciador para detectar las posibles bajadas de presión y los fallos de alimentación eléctrica, garantizando así la seguridad del paciente. Incorpora regulador para ajustar la presión del equipo según el peso del paciente.

Modo alternante

Mayor confort

Alterna periódicamente en un ciclo de 15 minutos.

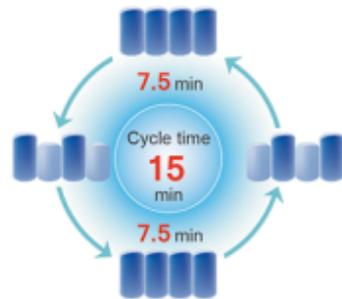

Sistema semi-digital

Fácil uso

El indicador de peso del panel de control, con alarmas visuales y acústicas, permite a los cuidadores optimizar el ajuste de presión.



Modo estático inflado total de celdas

Posibilidad de inflado estable

Para realizar cambios posturales, transferencias y limpiar al paciente de una forma segura.



Celdas rectangulares

Reducción de la presión y baja fricción


Gracias a la forma rectangular de las celdas, la superficie de contacto aumenta y la presión se reduce.




Pro-CARE 2

Sujeto: 176 cm/ 84 kg

Mapa de presión 1

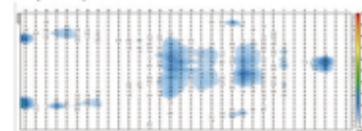

Mapa de presión 2

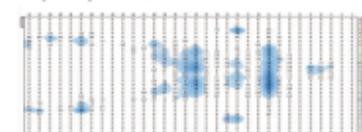

Especificaciones

	Modelo	Pro-CARE 2
Compresor	Dimensiones	29.1 x 20 x 11.7 cm
	Peso	2.2 Kg
	Material	Ignífugo ABS
	Tensión de alimentación	AC 220-240V, 50Hz; AC 120V/ 60Hz
Colchón	Ciclo de funcionamiento	15 minutos
		Sobre colchón de 5 pulgadas
	Dimensiones	200 x 90 x 12.7 cm
	Altura de la celda	18 x 5"
	Peso	7.3 kg
	Material de la funda	Stretch* bi-direccional
	Material de la celda	TPU
	Peso máximo paciente	180 kg

Funda Silver Stretch opcional.

*Tamaño 85 cm de anchura opcional.

*El flujo de aire y el tiempo de ciclo pueden cambiar ligeramente debido a diferencia de tensión y frecuencia eléctricas.



Información de pedido

Nº de referencia	Descripción
0103014	Pro-CARE 2 : 5" 220-240V/50Hz, Euroenchufe, 200x 90, Stretch
0103014-85	Pro-CARE 2 : 5" 220-240V/50Hz, Euroenchufe, 200x 85, Stretch
0110050	FUNDA ION PLATA 90
01100080-85	FUNDA ION PLATA 85